


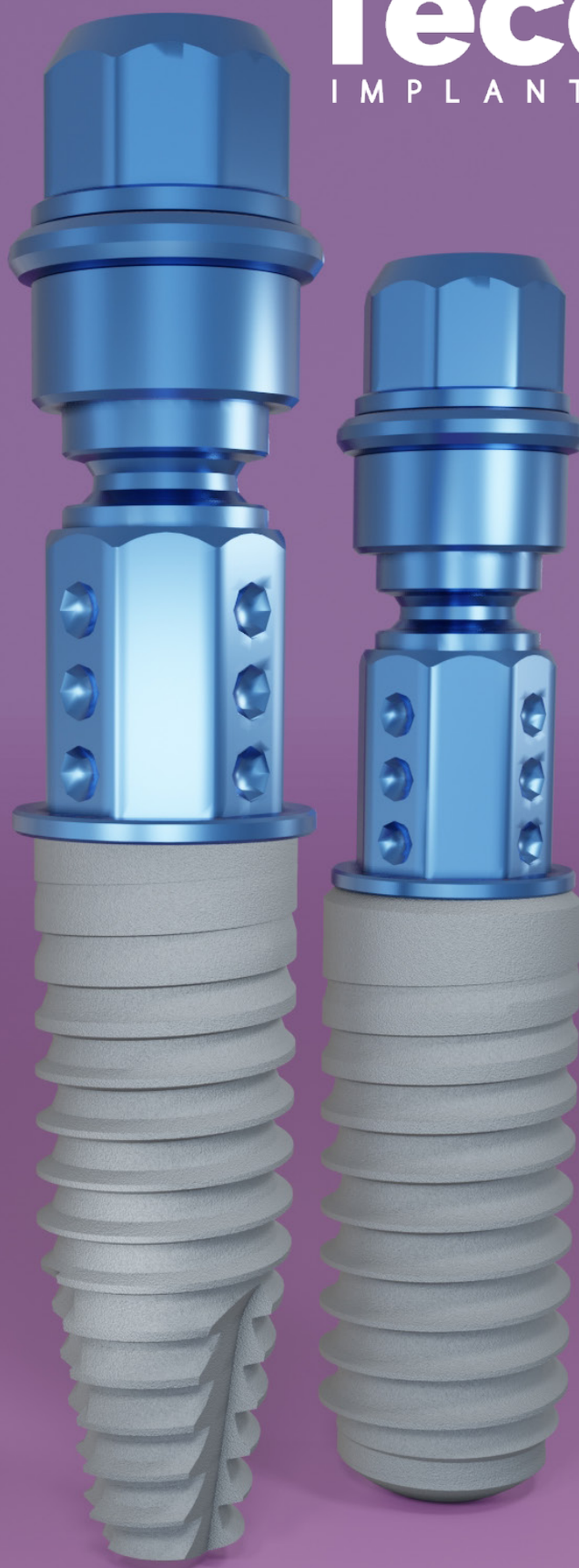

STR BL
Catalogo/Catalogue

Tecom

IMPLANTOLOGY

PRODUTTORI DI SISTEMI IMPLANTARI COMPATIBILI

Disponiamo di oltre duemila prodotti compatibili con i più rinomati marchi di implantologia, offrendo componenti protesici e di laboratorio, strumenti e sistemi implantari completi.

COMPATIBLE IMPLANT SYSTEMS MANUFACTURER

We have over two thousand products compatible with the most renowned implantology brands, offering prosthetic and laboratory components, instruments and complete implant systems.

CC SYSTEM	Compatibile con	Sistema implantare NobelActive® prodotto da Nobel Biocare™ Sistema implantare NobelParallel™ Conical Connection prodotto da Nobel Biocare™ Sistema implantare NobelReplace® Conical Connection prodotto da Nobel Biocare™
BRANE	Compatibile con	Sistema implantare Brånemark System® e NobelSpeedy® Groovy prodotto da Nobel Biocare™
BRANE-Z VITI ZIGOMATICHE	Compatibile con	Brånemark System Zygoma™ Machined prodotto da Nobel Biocare™
FRIA	Compatibile con	Sistema implantare Xive® S prodotto da Dentsply Syrona®
MINI-IMPIANTO	Ispirato a	mini impianti monofasici prodotti da Intra-Lock®
PT	Compatibile con	Sistema implantare Pitt-Easy® prodotto da Sybron Implant Solutions (ora distribuito come SyEasy da Simpla®)
REP	Compatibile con	Sistemi implantari NobelReplace® Straight e Tapered e con Replace Select™ Tapered prodotti da Nobel Biocare™
SCREW	Compatibile con	Sistema implantare Screw-Vent® prodotto da Zimmer®
STR	Compatibile con	Sistema implantare Straumann® Tissue Level prodotto da Straumann®
STR BL	Compatibile con	Sistema implantare Straumann® Bone Level prodotto da Straumann®

I marchi e i produttori sopracitati sono menzionati al solo fine di fornire informazioni in merito alla compatibilità dei prodotti Tecom Implantology® con gli originali di riferimento. Non vi è alcuna relazione imprenditoriale e/o commerciale fra Titanmed Srl e i produttori sopracitati.

Titanmed Srl è proprietaria esclusivamente del marchio Tecom Implantology® e non ha alcun diritto sugli altri marchi menzionati.

The aforementioned brands and manufacturers are mentioned for the sole purpose of providing information about the compatibility of Tecom Implantology® products with the reference original products. There is no entrepreneurial and/or commercial relationship between Titanmed Srl and the aforementioned manufacturers.

Titanmed Srl owns exclusively the Tecom Implantology® trademark and has no rights to the other mentioned brands.

INDICE

INDEX

Caratteristiche del sistema implantare STR BL STR BL implant system features	pag.4
Preparazione sito impantare e posizionamento impianto Implant site preparation and implant positioning - Impianti - Implants	pag. 7
Presca d'impronta Impression taking - Componenti da laboratorio - Lab components	pag. 10
Protesizzazione Prosthetic workflow - Parti protesiche - Prosthetic parts	pag. 12
Condizioni generali di vendita General sale terms	pag. 19

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA IMPLANTARE STR BL

STR BL IMPLANT SYSTEM FEATURES

IMPIANTO STR BONE LEVEL

IMPLANT STR BONE LEVEL



Connessione ottagonale interna 3.4 mm
Colletto cilindrico completamente trattato per preservare osso crestale
Octagonal internal connection 3.4 mm
Cylindrical collar fully treated to preserve crestal bone

Corpo cilindrico
Cylindrical body shape

Trattamento di superficie SL Titanmed
SL Titanmed surface treatment

Il passo del filetto di 0,8mm alla sommità consente un aggancio completo all'osso
The thread pitch of 0.8 mm at the top allows complete attachment to the bone

Disegno cilindrico dell'apice con punta arrotondata
Cylindrical apex design with rounded tip

IMPIANTO BONE LEVEL

L'impianto Straumann® Bone Level presenta un profilo esterno cilindrico (parallelo). Il nucleo è cilindrico nella regione apicale, fino a diventare leggermente conico nella sezione coronale, dando luogo a un leggero assottigliamento della filettatura. Il passo del filetto di 0,8mm alla sommità consente un aggancio completo all'osso.

L'impianto Bone Level è meglio posizionato con il bordo esterno del piccolo bordo inclinato a 45° (smusso) a livello dell'osso.


BONE LEVEL IMPLANT

The Straumann® Bone Level implant has a cylindrical (parallel) outer shape. The core is cylindrical in the apical region, becoming slightly conical in the coronal section, resulting in a slight tapering of the thread. The thread pitch of 0.8 mm at the top allows complete engagement with the bone.

The Bone Level Tapered Implant is best placed with the outer rim of the small 45° sloping edge (chamfer) at bone level.

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA IMPIANTARE STR BLT STR BLT IMPLANT SYSTEM FEATURES

IMPIANTO STR BONE LEVEL IMPLANT STR BONE LEVEL

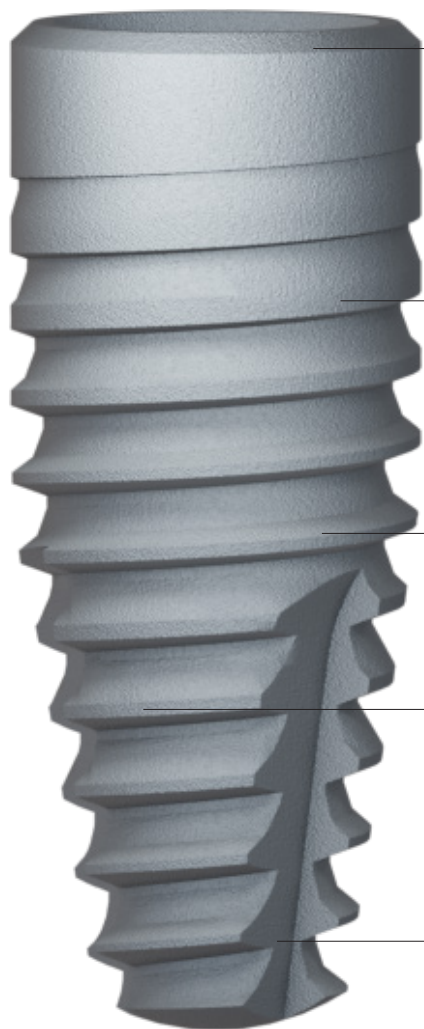

Connessione ottagonale interna 3.4 mm
Colletto cilindrico completamente trattato per preservare osso crestale
Octagonal internal connection 3.4 mm
Cylindrical collar fully treated to preserve crestal bone

Corpo conico
Tapered body shape

Trattamento di superficie SL Titanmed
SL Titanmed surface treatment

Il passo del filetto di 0,8mm alla sommità consente un aggancio completo all'osso
The thread pitch of 0.8 mm at the top allows complete attachment to the bone

Disegno cilindrico dell'apice con punta arrotondata
Cylindrical apex design with rounded tip

IMPIANTO BONE LEVEL TAPERED

L'impianto Bone Level Tapered Implant (BLT) è un impianto a livello dell'osso idoneo per trattamenti implantari a livello dell'osso in combinazione con guarigione transmucosa o sottomucosa. La superficie ruvida dell'impianto si estende alla sommità dell'impianto mentre il microgap è spostato all'interno lontano dall'osso.

BONE LEVEL TAPERED IMPLANT

The Bone Level Tapered Implant (BLT) is a bone-level implant suitable for bone-level implant treatments in combination with transmucosal or submucosal healing. The rough surface of the implant extends to the top of the implant while the microgap is moved inward away from the bone.

TRATTAMENTO SL SL SURFACE TREATMENT


Il trattamento SL Titanmed è tecnicamente comparabile ai migliori SLA™ maggiormente documentati in letteratura. Viene realizzato con una tecnica di sabbiatura con una tecnologia che permette la massima costanza di trattamento. A questa segue la mordenzatura con soluzioni acide. La sabbiatura genera sulla superficie dell'impianto una macrorugosità, a cui si sovrappone una micro-rugosità ottenuta tramite il processo di mordenzatura acida. La topografia superficiale che ne deriva genera la struttura idonea all'ancoraggio delle cellule osteoblaste e favorisce un'ottima integrazione dell'impianto con il tessuto osseo.

The Titanmed SL treatment is comparable with the best SLA™ treatments, documented in scientific journals. It is realized using sand-blasting technique with a technology which allows the maximum consistency of treatment. After this, the surface is etched with acid solutions. The sand-blasting step creates a macro roughness on the surface of the implant, then a micro roughness is formed on top of these with the acid etching process. The resulting texture of the surface generates a structure that is suitable for anchoring osteoblast cells, favouring the optimal integration of the implant with the bone tissue.

MATERIALE MATERIAL

Il titanio Grado 4 per uso medicale di primissima qualità, proveniente esclusivamente dagli U.S.A. viene utilizzato per la realizzazione degli impianti. Per tutti gli altri componenti viene utilizzato il titanio medicale Grado 5. Premium grade 4 titanium for medical applications, sourced exclusively from the U.S.A. is used for implants manufacture. Grade 5 medical grade titanium is used for all other components.

VITE DI CONNESSIONE CONNECTING SCREW

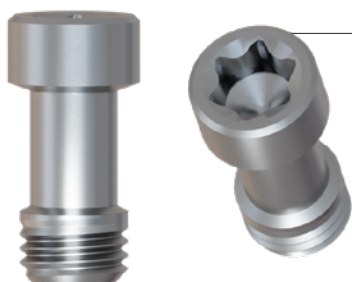

Titanmed le produce con l'impronta tipo M 2 - STELLA (TORX)

Titanmed produces them with the M 2 - STAR (TORX) type impression

Le viti di connessione delle parti protesiche nonostante abbiano stesso filetto e impronta possono essere, a seconda del diametro dell'impianto, differenti per lunghezza totale, altezza testa, inclinazione sottotesta, ecc.

The connecting screws of the prosthetic parts have the same thread and the same imprint may be different, depending on the diameter of the implant, in terms of overall length, head height, inclination under the head, etc.

NOTE SUL SERRAGGIO RACCOMANDATO RECOMMENDED TORQUE NOTE

IMPIANTO IMPLANT	35 Ncm
VITE TAPPO COVER SCREW	20 Ncm
COMPONENTI DA LABORATORIO LAB COMPONENTS	10 Ncm
PARTI PROTESICHE PROSTHETIC PARTS	NP 30 Ncm, RP 30 Ncm
MUA MUA	NP 30 Ncm, RP 30 Ncm
MUA COMPONENTI DA LABORATORIO MUA LAB COMPONENTS	10 Ncm
MUA PARTI PROTESICHE MUA PROSTHETIC PARTS	20 Ncm

PREPARAZIONE SITO IMPANTARE E POSIZIONAMENTO IMPIANTO IMPLANT SITE PREPARATION AND IMPLANT POSITIONING

I prodotti della linea STR Tecom Implantology® devono essere installati servendosi dello strumentario originale della linea Bone Level prodotta da Straumann®

STR Tecom Implantology® products should be installed using the original tools of Bone Level line produced by Straumann®

PROVISORIO PER PONTE (FUNZIONE PORTATORE)
TEMPORARY BRIDGE ABUTMENT (USED AS MOUNTER)



VITE TAPPO
COVER SCREW



I prodotti della linea STR Tecom Implantology® devono essere installati servendosi dello strumentario originale della linea Bone Level prodotta da Straumann®

STR Tecom Implantology® products should be installed using the original tools of Bone Level line produced by Straumann®


IMPIANTO
IMPLANT



01 IMPIANTI STR BL BL IMPLANTS


IMPIANTO STR BL Ø3.3 NC IMPLANT STR BL Ø3.3 NC

Fornito con portatore.
 Supplied with mounter.
 Vite tappo inclusa.
 Cover screw included.

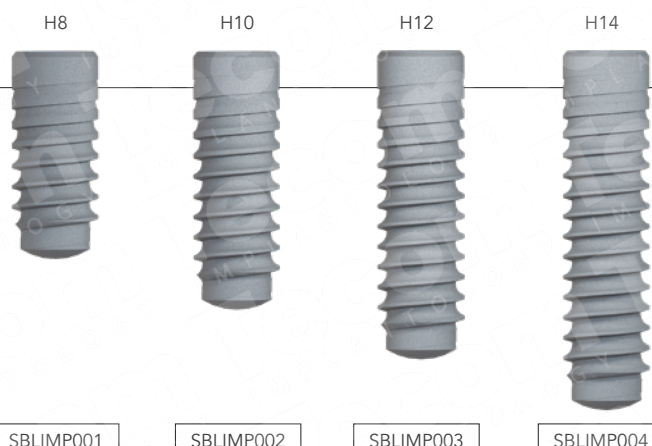


IMPIANTO STR BL Ø4.1 RC IMPLANT STR BL Ø4.1 RC

Fornito con portatore.
 Supplied with mounter.
 Vite tappo inclusa.
 Cover screw included.

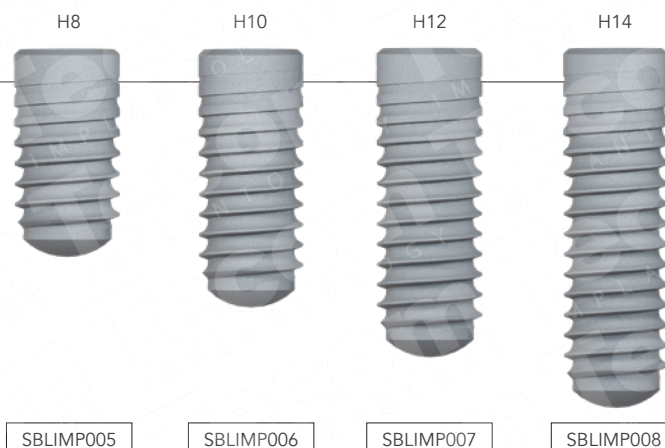

IMPIANTO STR BL Ø4.8 RC IMPLANT STR BL Ø4.8 RC

Fornito con portatore.
 Supplied with mounter.
 Vite tappo inclusa.
 Cover screw included.

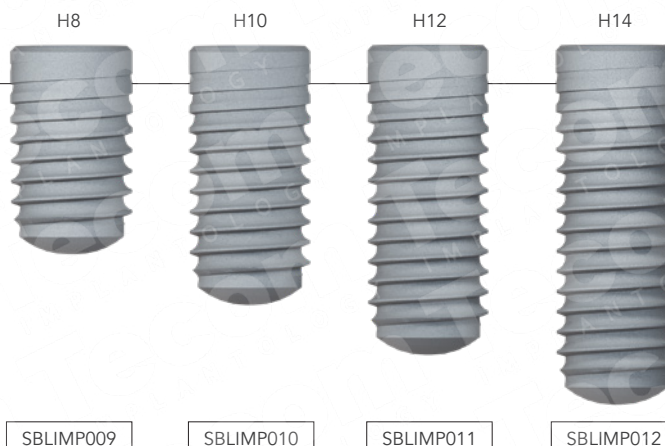

01 IMPIANTI STR BLT BLT IMPLANTS

STR BL

IMPIANTO STR BLT Ø3.3 NC IMPLANT STR BLT Ø3.3 NC

Fornito con portatore.
Supplied with mounter.
Vite tappo inclusa.
Cover screw included.

H8



SBTIMP001

H10



SBTIMP002

H12



SBTIMP003

H14



SBTIMP004

IMPIANTO STR BLT Ø4.1 RC IMPLANT STR BLT Ø4.1 RC

Fornito con portatore.
Supplied with mounter.
Vite tappo inclusa.
Cover screw included.

H8



SBTIMP007

H10




SBTIMP008

H12



SBTIMP009

H14

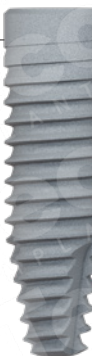

SBTIMP010

IMPIANTO STR BLT Ø4.8 RC IMPLANT STR BLT Ø4.8 RC

Fornito con portatore.
Supplied with mounter.
Vite tappo inclusa.
Cover screw included.

H8



SBTIMP013

H10




SBTIMP014

H12



SBTIMP015

H14

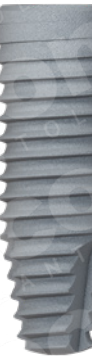


SBTIMP016

PRESA D'IMPRONTA IMPRESSION TAKING

I prodotti della linea STR Tecom Implantology® devono essere installati servendosi dello strumentario originale della linea Bone Level prodotta da Straumann®

STR Tecom Implantology® products should be installed using the original tools of Bone Level line produced by Straumann®

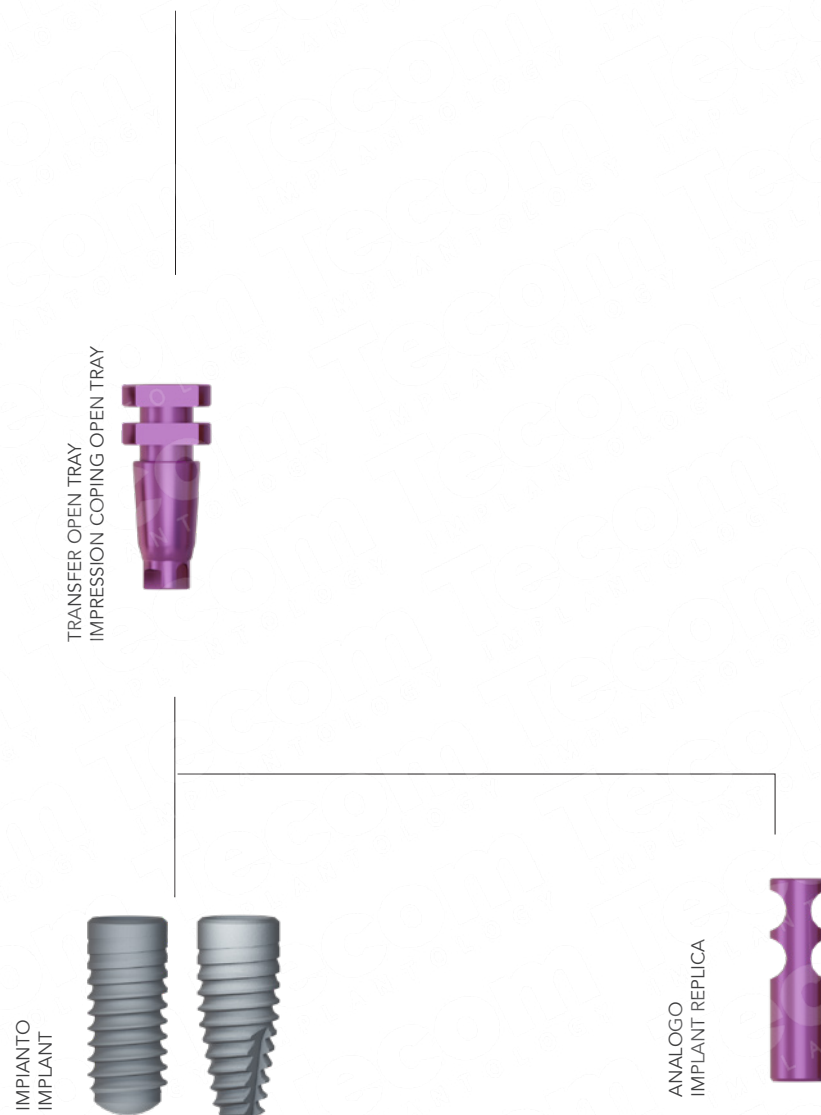

02 COMPONENTI DA LABORATORIO LAB COMPONENTS

TRANSFER OPEN TRAY IMPRESSION COPING OPEN TRAY



NC	SBLPPR002
RC	SBLPPR011

Componente anodizzato secondo codice colore
Anodized component according to color code
Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

ANALOGO IMPLANT REPLICA




NC	SBLPPR001
RC	SBLPPR010

Componente anodizzato secondo codice colore
Anodized component according to color code

PROTESIZZAZIONE PROSTHETIC WORKFLOW

I prodotti della linea STR Tecom Implantology® devono essere installati servendosi dello strumentario originale della linea Bone Level prodotta da Straumann®

STR Tecom Implantology® products should be installed using the original tools of Bone Level line produced by Straumann®

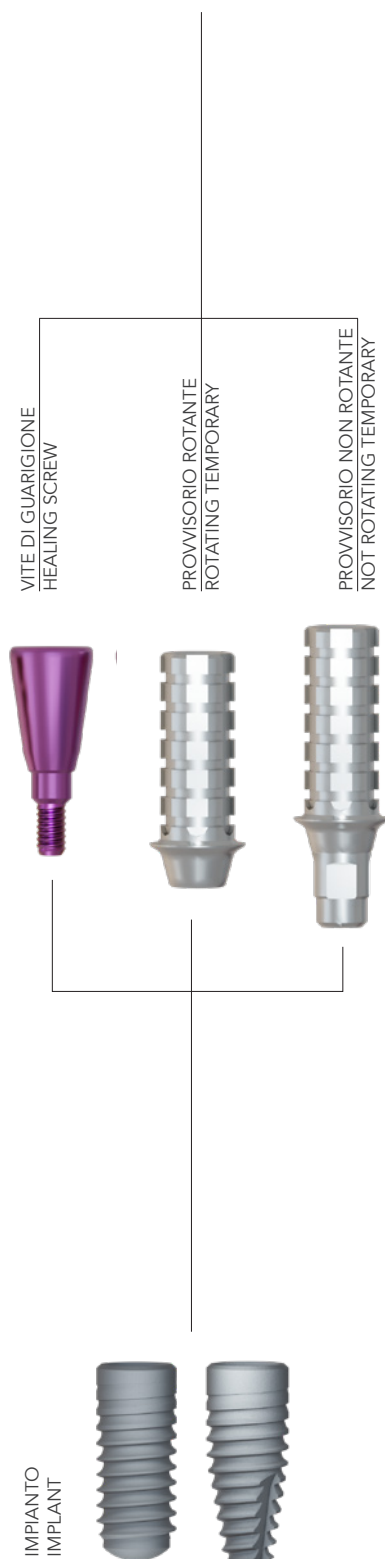

03 PARTI PROTESICHE PROSTHETIC PARTS

VITE DI GUARIGIONE CONICA CONICAL HEALING SCRE



		H			
		3.5	4	5	6
Ø	3,6 NC	SBLVIT003	/	SBLVIT004	/
	5 RC	/	SBLVIT007	/	SBLVIT008

Componente anodizzato secondo codice colore
 Anodized component according to color code

MONCONE PROVVISORIO ROTANTE TEMPORARY ROTATING ABUTMENT



NC	SBLPPR004
RC	SBLPPR013

Componente anodizzato secondo codice colore
 Anodized component according to color code
 Vite di connessione inclusa
 Connecting screw included

MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE TEMPORARY NON ROTATING ABUTMENT



NC	SBLPPR003
RC	SBLPPR012

Componente anodizzato secondo codice colore
 Anodized component according to color code
 Vite di connessione inclusa
 Connecting screw included

BARRETTA DI SALDATURA (10 PZ.) WELDING BAR (10 PCS)




Ø	1.2	VARPPR006
	1.5	VARPPR005
	2	VARPPR004

MUA (MULTI UNIT ABUTMENT) PER OVERDENTURE - POSIZIONAMENTO

MUA (MULTI UNIT ABUTMENT) FOR OVERDENTURE - POSITIONING

I prodotti della linea STR Tecom Implantology® devono essere installati servendosi dello strumentario originale della linea Bone Level prodotta da Straumann®

STR Tecom Implantology® products should be installed using the original tools of Bone Level line produced by Straumann®

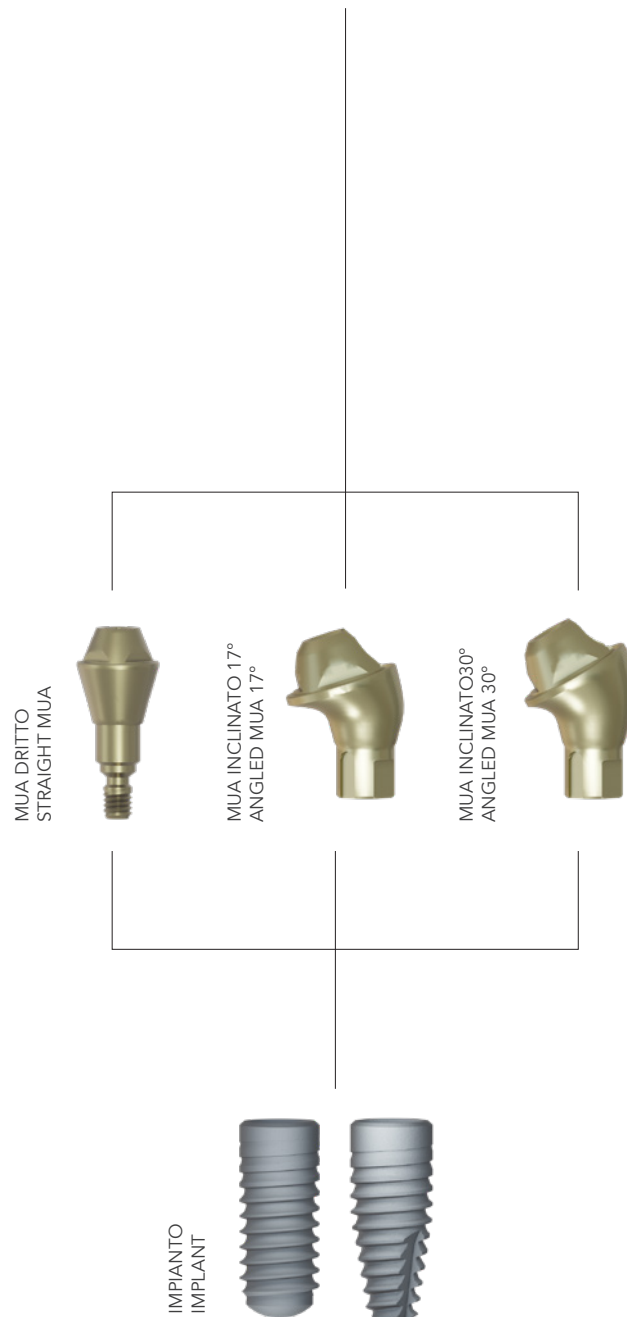


MUA PER OVERDENTURE - PRESA D'IMPRONTA MUA FOR OVERDENTURE - IMPRESSION TAKING

I prodotti della linea STR Tecom Implantology® devono essere installati servendosi dello strumentario originale della linea Bone Level prodotta da Straumann®


STR Tecom Implantology® products should be installed using the original tools of Bone Level line produced by Straumann®

STR BL

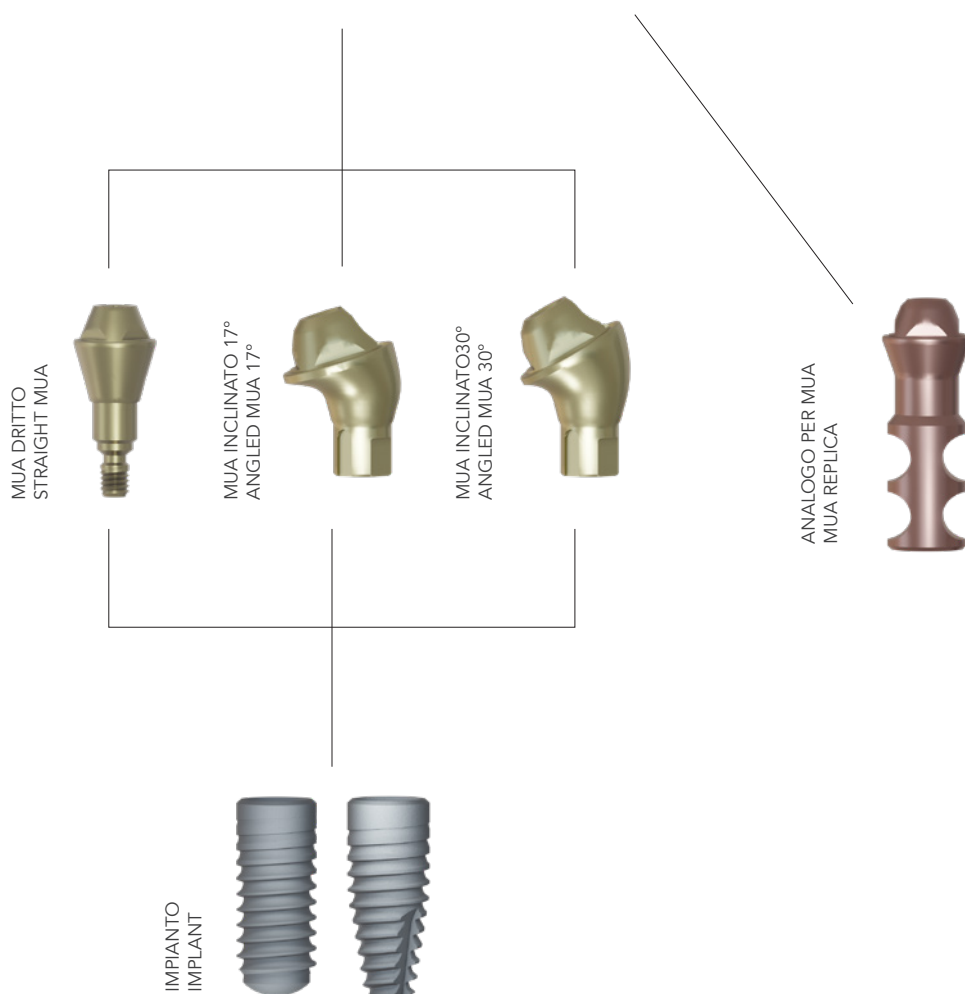

I prodotti della linea STR Tecom Implantology® devono essere installati servendosi dello strumentario originale della linea Bone Level prodotta da Straumann®

STR Tecom Implantology® products should be installed using the original tools of Bone Level line produced by Straumann®

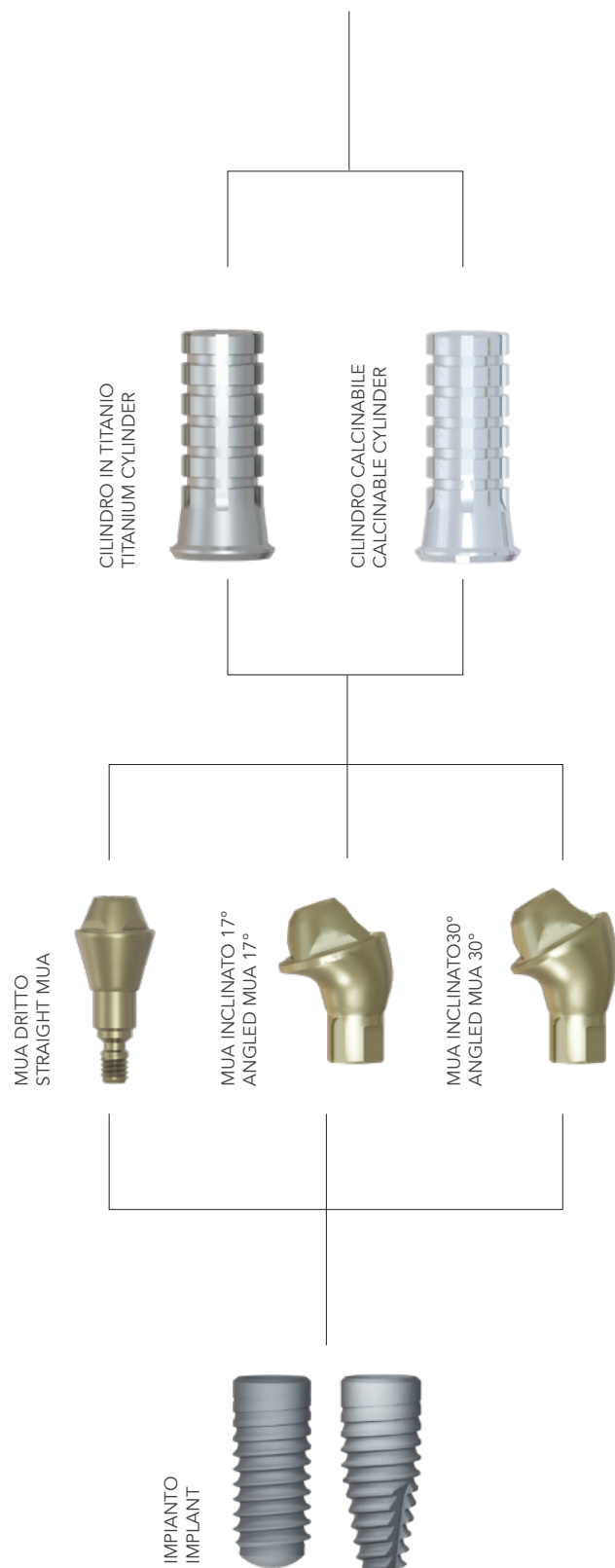

04 MUA MUA

MUA DRITTO STRAIGHT MUA



		H		
		1.5	2.5	3.5
Ø	NC	SBLPPR023	SBLPPR024	SBLPPR025
	RC	SBLPPR040	SBLPPR041	SBLPPR042

MUA INCLINATO 17° TIPO A 17° ANGLED MUA TYPE A

COMING SOON



		H			
		2.5	3.5	4.5	5.5
Ø	NC	SBLPPR026	SBLPPR027	SBLPPR028	SBLPPR029
	RC	SBLPPR043	SBLPPR044	SBLPPR045	SBLPPR046

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

MUA INCLINATO 30° TIPO A 30° ANGLED MUA TYPE A

COMING SOON



		H		
		3.5	4.5	5.5
Ø	NC	SBLPPR030	SBLPPR031	SBLPPR032
	RC	SBLPPR047	SBLPPR048	SBLPPR049

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

05 COMPONENTI DA LABORATORIO MUA MUA LAB COMPONENTS

TRANSFER PER MUA CON VITE L 15 IMPRESSION COPING FOR MUA WITH SCREW L 15

COMING SOON

SCRPPR059

SBLVIT016



ANALOGO PER MUA
MUA REPLICA

Ø 4.6 SBLPPR058

06

PARTI PROTESICHE MUA MUA PROSTHETIC PARTS



CILINDRO IN TITANIO
TITANIUM CYLINDER

Ø 4.6 SBLPPR021



CILINDRO CALCINABILE
CALCINABLE CYLINDER

Ø 4.6 SBLPPR022

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA GENERAL SALE TERMS

VALIDITÀ Il presente listino è l'Ed.2024_01 e sostituisce le edizioni precedenti.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ Gli impianti dentali prodotti da Titanmed Srl (d'ora in poi anche "Titanmed") e gli altri dispositivi medicali Titanmed devono essere utilizzati soltanto con componenti e strumenti originali Straumann®. L'uso di dispositivi prodotti da aziende terze o prodotti da Titanmed ma non appartenenti alla linea implantare di riferimento, in combinazione con impianti dentali e dispositivi Titanmed, comporta la decadenza della garanzia e l'annullamento di qualsiasi obbligo, espresso o implicito, dell'azienda Titanmed.

I protocolli clinici forniscono al professionista utilizzatore una guida di riferimento e non devono essere intesi come un'alternativa alla formazione ed esperienza professionale dell'utilizzatore. Il professionista utilizzatore dei dispositivi medicali Titanmed deve accertare l'idoneità del dispositivo in base al singolo paziente ed alle circostanze esistenti.

Titanmed non riconosce alcuna responsabilità, espressa o implicita, né avrà alcuna responsabilità per eventuali danni diretti, indiretti, penali o di altro genere da essi derivanti o associati ad eventuali errori commessi nel giudizio professionale, nell'applicazione pratica o nell'inserimento di prodotti Titanmed. Il professionista utilizzatore è inoltre tenuto ad aggiornarsi continuamente sui più recenti sviluppi e sulle applicazioni dei dispositivi medicali Titanmed.

Eventuali descrizioni degli articoli, rappresentazioni, illustrazioni sui cataloghi, materiali illustrativi e commerciali, listini prezzi o altri documenti informativi emessi e distribuiti da Titanmed in qualsiasi forma, sono forniti a scopo meramente illustrativo. L'Acquirente dà atto di non procedere all'acquisto degli articoli riponendo affidamento su tali descrizioni e/o illustrazioni.

COPYRIGHT E MARCHI DI FABBRICA È vietata la riproduzione o la pubblicazione anche parziale di questo listino senza autorizzazione scritta di Titanmed Srl, sia in forma cartacea che multimediale. Marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali e nomi di società citati in questo documento non sono di proprietà di Titanmed S.r.l. né di aziende ad essa collegate ma sono di proprietà dei rispettivi titolari o registrati da altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e cioè al fine di fare comprendere caratteristiche e funzionalità dei prodotti di Titanmed, senza alcuna violazione dei diritti di Copyright vigenti. Tutela della privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

ORDINI Gli ordini degli impianti dentali e dei dispositivi medicali Titanmed possono essere effettuati citando il codice articolo e relativa quantità, con le seguenti modalità:

TELEFONO: 0039 0341 363504

lunedì – venerdì 08:30-13:00 / 14:00-17:00

EMAIL: ordini@tecomimplantology.com

SPEDIZIONE DEL MATERIALE Salvo diversa pattuizione o per cause di forza maggiore, la merce sarà spedita all'indirizzo indicato dall'acquirente entro il termine indicativo di 24 ore lavorative dall'accettazione dell'ordine di acquisto.

RESO DEL MATERIALE Il diritto alla sostituzione del materiale acquistato può essere esercitato entro 5 giorni lavorativi dalla data di consegna dei dispositivi e deve essere pre-autorizzato da Titanmed in forma scritta.

Il diritto alla sostituzione del materiale decade totalmente per mancanza della condizione essenziale di integrità del bene (confezione e/o suo contenuto), nei casi in cui Titanmed rilevi l'avvenuta apertura della confezione e/o il danneggiamento della confezione (ancorché sigillata) e/o il danneggiamento del prodotto per cause diverse dal suo trasporto.

Nel caso in cui Titanmed non accetti la sostituzione del bene, provvederà alla restituzione dello stesso all'acquirente, addebitandogli le spese di spedizione.

MODIFICHE AL PRODOTTO E AI PREZZI Titanmed si riserva in qualsiasi momento il diritto di modificare gli articoli contenuti in questo listino ed i relativi prezzi o di eliminarli dalla produzione senza alcun preavviso.

LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE Le presenti Condizioni di Vendita saranno disciplinate ed interpretate secondo il diritto italiano e soggette alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Milano (Italia).

VALIDITY This pricelist is the Ed.2024_01 and replaces any previous editions.

EXCLUSION OF RESPONSIBILITY The dental implants manufactured by Titanmed Srl (hereinafter also "Titanmed") and other Titanmed medical devices may be used only with original Straumann® instruments. The use of devices manufactured by other companies or manufactured by Titanmed but not belonging to the same implant line shall invalidate the warranty and terminate any explicit or implicit obligation of Titanmed.

The clinical protocols provide the practitioner with a reference guide and shall not be construed as an alternative to the user's training and professional experience.

The practitioner using Titanmed medical devices must ensure that device being used is suited to the patient and to existing circumstances. Titanmed does not acknowledge any explicit or implicit responsibility, nor shall it have any responsibility for any direct, indirect, criminal or other damage deriving from or associated with any mistakes in professional judgements, in the practical application or insertion of Titanmed products. The practitioner is also under the obligation to keep up-to-date at all times with the most recent developments and applications of Titanmed medical devices.

Any descriptions of the products, depictions, illustrations in catalogues, illustrative and sales materials, price lists or other informative documents issued and distributed by Titanmed in any form are provided only for explicative purposes. The Purchaser acknowledges that he/she does not purchase the products on the basis of such descriptions and/or illustrations.

COPYRIGHT AND TRADEMARKS It is strictly prohibited to copy or publish all or any part of this pricelist without the written authorisation of Titanmed in any paper and electronic form. Third-party brands, product names, trademarks and corporate names mentioned are trademarks owned by the legitimate owners and trademarks registered by other companies have been used for explanatory purposes only, with the aim to illustrate Titanmed's product features, without breach any of the Copyright rights in force. Protection of privacy pursuant to Italian Legislative Decree 196/2003.

ORDER PLACEMENT Titanmed dental implants and medical devices can be ordered by quoting the product code and desired quantity, in the following ways:

TELEPHONE: 0039 (0)341 363504

Monday – Friday 08:30-13:00 / 14:00-17:00

EMAIL: export@tecomimplantology.com

PRODUCT SHIPMENTS Unless otherwise agreed or in cases of force majeure, the goods will be shipped to the address indicated by the client within approximately 24 hours from the acceptance of the purchase order.

RETURNED MATERIALS The right to have purchased products replaced may be exercised within 5 working days from the products delivery date and must be pre-authorised by Titanmed in writing.

The right to replacement shall be cancelled in the event the product integrity (packaging and/or its content) is compromised. For example in the cases in which Titanmed observes that the package has been opened and/or that the package has been damaged (even if still sealed) and/or that the product has been damaged other than for transportation.

If Titanmed does not accept to replace the product, it will return it, charging shipment costs to the Purchaser.

CHANGES TO THE PRODUCTS AND PRICES Titanmed reserves the right to make changes to the products contained in this pricelist and to their prices or to discontinue their production at any time, without having to give prior notice.

APPLICABLE LAW AND JURISDICTION These Sales Terms shall be governed and interpreted according to Italian law and the exclusive place of jurisdiction shall be the courts of Milan (Italy).



CONTATTI

TITANMED S.r.l.

Sede amministrativa e operativa:
Via Piedimonte 8/B
23868 Valmadrera (LC) - Italia

Tel: 0039 0341 363504
Email: ordini@tecomimplantology.com

CONTACTS

TITANMED S.r.l.

Administrative and operational location:
Via Piedimonte 8/B
23868 Valmadrera (LC) - Italia

Tel: 0039 0341 363504
Email: export@tecomimplantology.com



www.titanmed.it
www.tecomimplantology.com